
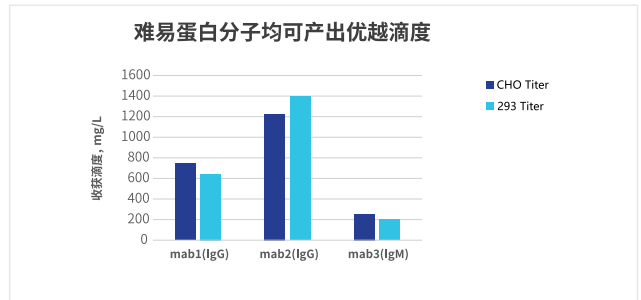
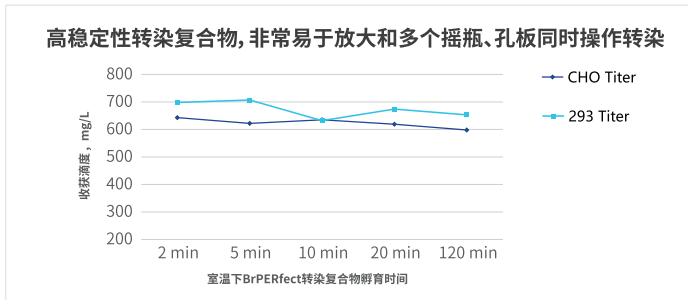
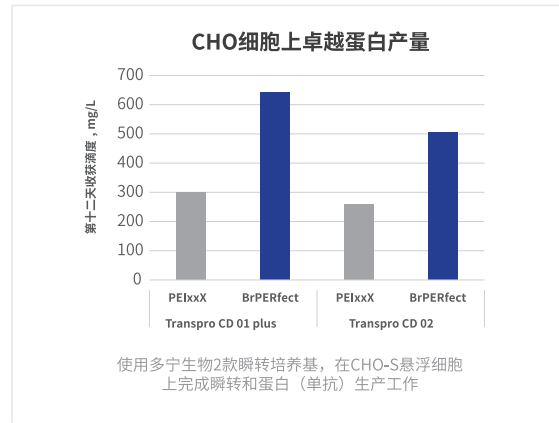


293和CHO细胞通用、高效转染试剂

适配各类蛋白质分子高效产出 BrPERfect® for Protein DNA Transfection Reagent

产品特点

- 创新技术：基于全新的可生物降解阳离子聚合物，与PEI截然不同。
- 性能卓越：对于不同蛋白质分子均可显著提高产量，超越主要竞品。
- 经济实惠：每升293或CHO细胞悬液转染仅需0.5 mL，节省、通用、方便。
- 稳定性强：转染复合物在室温下至少稳定2小时，非常适合放大和高通量瞬时转染操作。
- 操作简便：无需颠倒或温和操作混匀，也无需精确计时，只需简单快速混合，操作简单，批次一致性高。

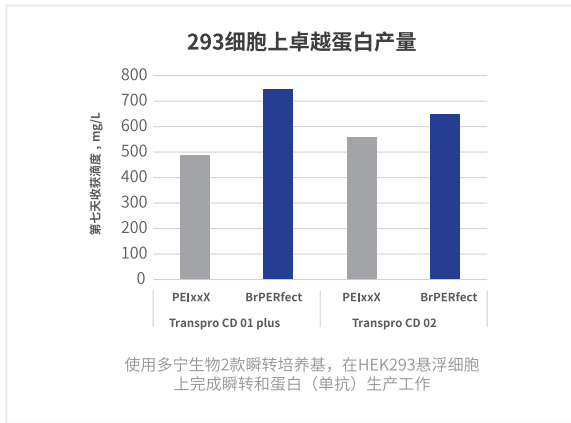

订货信息

品名	货号	规格
BrPERfect® for Protein DNA Transfection Reagent	100006P-1	1 mL
	100006P-20	20 mL
	100006P-100	100 mL

上海多宁生物科技股份有限公司

官网:www.duoningbio.com

邮箱:marketing@duoningbio.com

地址：上海市松江区民强路1525号申田新办公领地30栋

